

FOLLETO DEL PRODUCTO

**KERN
SET-07**

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch
SET-07
Variable

EasyTouch Variable – Variable libre

CONTACT





KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

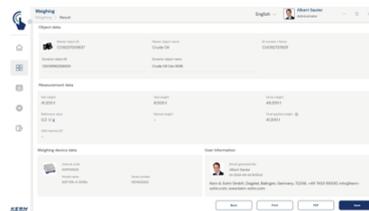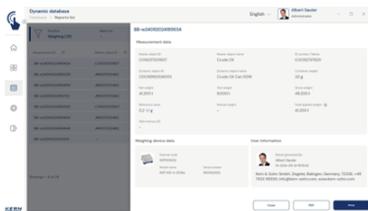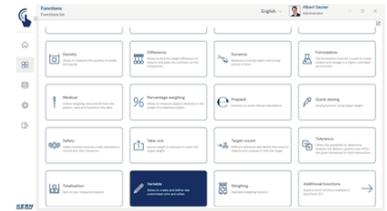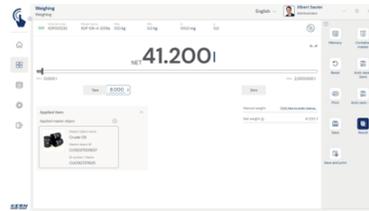

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

- Nota: El requisito para este set es el programa básico SET-01 Base
- Con este conjunto, se pueden definir distintas propiedades físicas de los objetos de pesaje como unidad de medida, guardarlas y utilizarlas en otras partes del programa que estén relacionadas linealmente con su peso. Esto simplifica, p. ej., la visualización a la hora de determinar el peso o el número de piezas por cable, longitud de hilo o alambre, superficie de papel, baldosa o tejido, peso específico de líquidos o incluso conjuntos enteros como placas de circuitos impresos ensambladas, artículos totalmente montados, etc.
- El resultado del pesaje se convierte automáticamente en la unidad meta definida y se visualiza como se muestra ().
- Una nueva fórmula de conversión se puede indicar de forma rápida y sencilla. Esta se puede referir a „g“ o „kg“. Además, a la fórmula se le puede también asignar un nombre y una descripción. La unidad del resultado convertido también se puede definir al propio arbitrio
- Las fórmulas programadas se puede seleccionar y aplicar con facilidad
- Una vez creadas las unidades, como p. ej. m, l o metros cuadrados, pueden asignarse a cualquier objeto de datos maestros. La fórmula de conversión del peso pesado a la nueva unidad también puede introducirse individualmente para cada objeto. Esto significa que el resultado del pesaje de dichos objetos de datos

maestros se calcula y se emite correctamente en la unidad individual, por ejemplo, 100 g = 55 cm de alambre

- Una vez creadas las unidades, como p. ej. m, l o metros cuadrados, pueden asignarse a cualquier objeto de datos maestros. La fórmula de conversión del peso pesado a la nueva unidad también puede introducirse individualmente para cada objeto. Esto significa que el resultado del pesaje de dichos objetos de datos maestros se calcula y se emite correctamente en la unidad individual, por ejemplo, 100 g = 55 cm de alambre
- Memoria central de datos maestros: En la memoria de datos maestros se puede guardar, si lo hay, el valor de tara del envase, la caja o la recipiente típicos. Este valor se resta luego automáticamente el resultado de pesaje
- Identificación segura: Ofrece la posibilidad de guardar cada resultado de pesaje realizado y almacenado con un número de identificación inequívoco (identificación de objeto dinámico) y un nombre identificativo (nombre de objeto dinámico). El almacenamiento de los datos se activa de forma semiautomática o totalmente automatizada, siempre que se descargue la balanza y se vuelva a cargar de nuevo. Esto significa que el usuario ya no tiene que pulsar ninguna tecla al almacenar datos en masa, para una mayor eficiencia al trabajar
- Función de impresión en el ordenador y función de escaneo de códigos de datos: La utilización de KERN EasyTouch en un entorno de Windows® o Android™ permite aprovechar plenamente la infraestructura de periféricos del ordenador o tableta. Especialmente, una impresora estándar de Windows y una impresora de etiquetas de un ordenador permiten imprimir numerosos recibos de pago o etiquetas adhesivas compactas con el resultado del conteo, de forma personalizada

Opciones

- Función de almacenamiento de datos central Save Server (SET-10) para guardar adicionalmente todos los datos de medición en un directorio central y local del servidor. Aquí se guardan los datos de medición de todos los sistemas de pesaje EasyTouch conectados, así como de todas las funciones EasyTouch que haya instaladas. Especialmente los usuarios con varios sistemas de pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos los datos de pesaje consolidados en una sola base de datos, pudiendo buscar en una única tabla los distintos datos de medición de varias balanzas. Los datos guardados en la memoria de Save Server están también a salvo de manipulaciones y no se pueden modificar

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SET-07
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software

Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761360501
Modelo predecesor	SET-07-2021a
Número del arancel aduanero	85234910

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

FUNCIONES

Standard



Option



PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SET-311	KERN EasyTouch SET-311 Quick Key
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print