


Software EasyTouch SET-18 Container Master

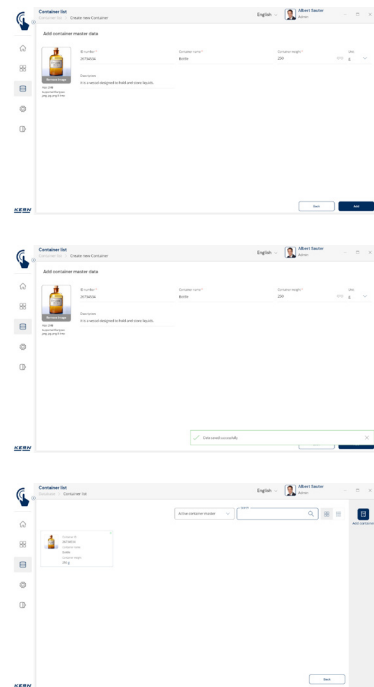

EasyTouch Container Master – Zentrale Behälterverwaltung

Merkmale

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Behälter-Management: Verschiedene Artikel werden in gleichartigen Behältern (Containern) gelagert und gewogen. Die Tara-Gewichte dieser Behälter lassen sich mit SET-18 Container Master zentral verwalten. Ändert sich das Gewicht eines Behälters, wird das neue Tara-Gewicht einfach in Container Master aktualisiert und automatisch bei allen zugehörigen Artikeln und Funktionen der Anwendung übernommen
- Feste Zuordnung: Jedem Stammdatenobjekt kann ein Behälter fest zugeordnet werden, um Konsistenz zu gewährleisten
- Behälter-Anzeige: Bei der Verwendung eines Stammdatenobjektes sehen Nutzer in EasyTouch den fest zugeordneten Behälter oder einen manuell ausgewählten Behälter. Dies reduziert das Risiko von Verwechslungen und verbessert die Genauigkeit im Arbeitsprozess
- Behälter-Auswahl: Nutzer können auch ohne vorherige Festlegung einen Behälter direkt im Wiegevorgang auswählen, beispielsweise durch Scannen der Behälter-ID mittels Barcode. Dies trägt dazu bei, fehlerhafte Tara-Eingaben zu vermeiden

STANDARD



OPTION

