

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN SET-311

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch SET-311 Quick Key

EasyTouch Quick Key – Seleccionar objetos de datos maestros con rapidez y en función del usuario

CONTACT






KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

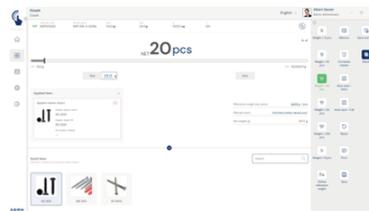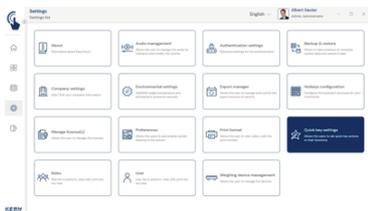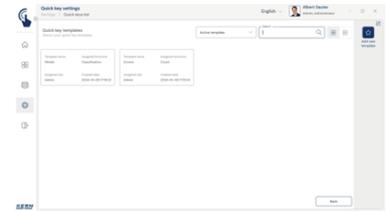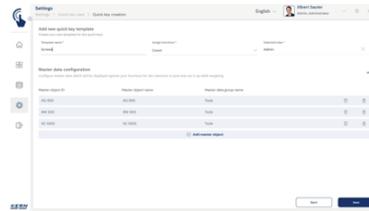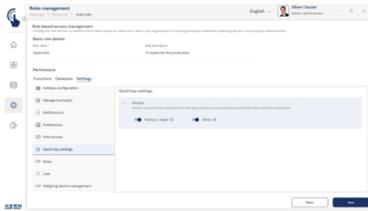

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

- Nota: El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base
- Quick Keys pueden crearse en numerosos sets, p. ej.
 - SET-01 Base
 - SET-05 Dynamic
 - SET-06 Classification
 - SET-07 Variable
 - SET-08 Take Out
 - SET-31 Tolerance
 - SET-32 Count
 - SET-33 Target Count
- Teclas de selección rápida de datos maestros: Con la tecla rápida ET se pueden visualizar permanentemente para una selección rápida determinados objetos de datos maestros. Las teclas rápidas se muestran directamente en la pantalla
- Guardar: Cada resultado de pesaje o conteo de piezas, ya se haya seleccionado convencionalmente o con una tecla rápida, se guarda relacionado con el objeto de los datos maestros seleccionado
- Selección de los objetos de los datos maestros: Los objetos determinados del maestro de datos que se

muestran como teclas rápidas se pueden seleccionar o bien de forma individual, o bien como grupo definido de datos maestros que incluye los datos maestros como las teclas rápidas

- En función del usuario: Las teclas rápidas se pueden crear como un esquema con respecto a determinados roles de usuario. Esto significa que a los usuarios de un determinado rol se les muestran determinados objetos de datos maestros para su selección rápida. Esto permite, por ejemplo, que distintos departamentos de una misma empresa trabajen con distintos datos maestros sin solaparse
- Guardar e imprimir: En función del esquema, se puede ajustar si, además de la operación de guardar, se quiere imprimir o no automáticamente

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado



Modelo de código de artículo	SET-311
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761486546
Número del arancel aduanero	85234910

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

FUNCIONES

Standard



Option