

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# KERN SCD-4.0-DL

Data: 19.04.2025

ITALIANO



Registrazione o trasmissione flessibile dei valori di misurazione, in particolare anche con Microsoft® Excel o Access

## CONTACT





KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI

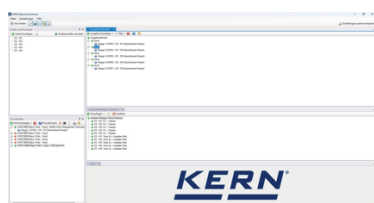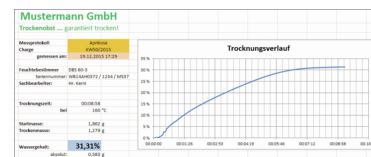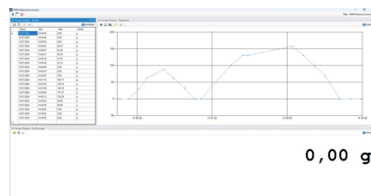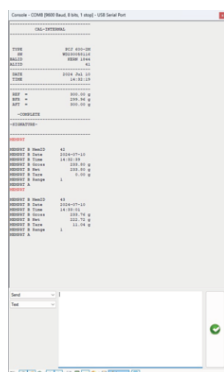

| Rezept |                 |              |              |               |                  |            |         |                |       |
|--------|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------|----------------|-------|
| Datum  | Start           | Endigen      | Seitenlayout | Formeln       | Daten            | Überprüfen | Ansicht | Automatisieren | Hilfe |
| G15    |                 |              |              |               |                  |            |         |                |       |
| A      | B               | C            | D            | E             | F                | G          | H       | I              | J     |
| 4      |                 |              |              |               |                  |            |         |                |       |
| 5      | RSI 4200-2M     | Vaseline     | 200 g        | 200,00 g      | 2023-05-27 12:15 | 0,47 g     | 0,23%   | 200,47 g       |       |
| 6      | (große Mengen)  | Alkohol      | 400 g        | 411,21 g      | 2023-05-27 12:15 | 11,21 g    | 2,80%   | 411,68 g       |       |
| 7      |                 | Wasser       | 1000 g       | 1001,39 g     | 2023-05-27 12:15 | 1,39 g     | 0,14%   | 1.001,67 g     |       |
| 8      | ABi 80-4M       | Drogensubst. | 5,000 g      | 4,9991 g      | 2023-05-27 12:15 | -0,0007 g  | -0,01%  | 4,9983 g       |       |
| 9      | (kleine Mengen) | Therakombi   | 1,000 g      | 0,9984 g      | 2023-05-27 12:15 | -0,0016 g  | -0,16%  | 0,9968 g       |       |
| 10     |                 | Boxe         | 0,001 g      | 0,0011 g      | 2023-05-27 12:15 | 0,0001 g   | 10,00%  | 0,0011 g       |       |
|        |                 |              |              | <b>Gesamt</b> |                  |            |         |                |       |
|        |                 |              |              | <b>Gesamt</b> |                  |            |         |                |       |

## DESCRIZIONE

- Per sistemi operativi Windows 10, 11
- È richiesto .NET Framework 4.8.1
- Per l'installazione sono necessari i diritti di amministrazione completi
- Supporta bilance e strumenti di misurazione con USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, rete LAN oppure WiFi (TCP/UDP/IP)
- Massima flessibilità di formattazione e strutturazione della stampa (sequenza e posizionamento a piacere, formattazione e arrotondamento), in particolare su richiesta anche registrazione di data e ora per ogni valore trasmesso
- Numero discrezionale di apparecchi/interfacce collegabili, anche registrazione contemporanea e sincronizzata di più bilance
- Richiesta mediante tasti o temporizzata di valori di misurazione o attivazione di funzioni dell'apparecchio anche per registrazioni continue
- I protocolli di interfaccia delle bilance KERN (configurazione standard) sono già predefiniti. Possibilità di supportare altre bilance grazie alla configurazione flessibile

- Il rispettivo cavo d'interfaccia è compreso ordinando contemporaneamente una bilancia KERN
- Varie e numerose possibilità di trasmissione e registrazione:
  - MicrosoftR Excel/Access/Word in primo piano o di sfondo
  - Altra applicazione Windows (tramite simulazione tasti), p. es. software di spedizioni o sistema ERP (SAP, Sage,...)
  - Archiviazione file (p. es. come testo o come file CSV)
  - Stampa su stampante per testi o per etichette
- Stampe di schermate come visualizzazione grande, diagramma di andamento ( curva di essiccazione nei misuratori d'umidità, istogramma, ...
- Vantaggi:
  - Gli errori di battitura, possibili nella digitazione manuale, sono esclusi
  - Registrazione automatica, per es. per prove di durata
  - Software di laboratorio conforme alle indicazioni GLP
  - Utilizzabile ad ampio spetto per settore e applicazione
- Materiale in dotazione: Link per scaricare 1 licenza

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo       | SCD-4.0-DL                            |
| Modello-Serie                 | SCD                                   |
| Assortimento                  | KERN                                  |
| Tipologia di prodotto         | Software                              |
| Gruppo di prodotti            | Connessione bilancia                  |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello)          | 404576 12 12206                       |
| Modello precedente            | SCD-4.0; SCD-4.0S05                   |
| Numero di tariffa doganale    | 852349 10                             |

### FUNZIONI

Standard



### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tempo di consegna | 1 d |
|-------------------|-----|