

**BROCHURE DEL PRODOTTO**

---

**KERN  
SET-10**

Data: 19.04.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-10

**Save-Server**

EasyTouch Save Server – Memoria dati di pesatura centrale

---

**CONTACT**


KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI

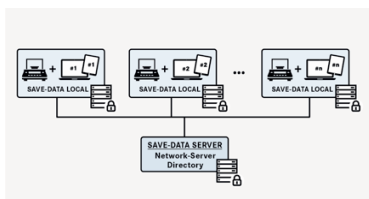

## DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Save-Server si basa su Save-Data Local. Save-Data Local fa parte di SET-01 Base ed è la memoria centrale dei dati di misurazione per tutte le funzioni EasyTouch di una licenza locale KERN Easy Touch (memoria dati dinamica). Tutti i dati di pesata e di misurazione stampati e salvati vengono memorizzati in questa memoria. I dati vengono memorizzati nella memoria dell'apparecchio indicatore locale. Tutti i dati di memoria sono salvati al riparo dalle manipolazioni, cioè non possono essere modificati. Le modifiche dei dati base sono anch'esse salvate nella memoria dati dinamica a prova di manipolazione (tracciabilità dei dati). I dati dinamici possono essere consultati in qualsiasi momento, stampati o esportati sotto forma di tabella
- Save-Server: Salva tutti i dati di misurazione come copia nella memoria locale in una directory di rete centrale. Su questa server directory centrale tutti i sistemi EasyTouch salvano i propri dati di misurazione come copia. Con la server directory centrale si garantisce che tutti i dati di misurazione siano salvati a livello centrale e possano essere richiamati in qualsiasi momento da un punto centrale. Eventualmente con la protezione di un firewall, nessuno dall'esterno può accedere ai dati nella rete locale
- Save-Server: Tutti i dati di misurazione vengono salvati al riparo da manipolazioni su una server directory (memoria del valore di misura). Si evita quindi la perdita o la modificazione dei dati
- Esportazione dei dati: I dati dinamici possono essere richiamati in qualsiasi momento, stampati oppure esportati sotto forma di tabella
- Le modifiche dei dati base sono anch'esse salvate nella memoria dati dinamica a prova di manipolazione (Data Traceability)
- Inoltre, i dati anagrafici di tutte le istanze EasyTouch sono costantemente sincronizzati. Ciò significa che tutte le postazioni di lavoro EasyTouch dispongono sempre degli stessi dati anagrafici, anche se guasti di rete di breve durata impediscono l'accesso al database centrale
- Amministratore di rete: Per configurare una memoria dati centrale (Save-Server) è necessario un amministratore di rete locale

- Validazione e funzionamento omologato: Mediante la validazione del software si garantisce che questa memoria sicura dei dati su server possa essere utilizzata ad es. per le organizzazioni operanti nel settore farmaceutico (conformità alla norma 21 CFR Parte 11, ed altre). I dati di pesata derivanti da utilizzi regolamentati dalla legge possono essere memorizzati e archiviati in EasyTouch conformemente alle norme, utilizzando bilance abilitate con omologazione valida e memoria dei valori misurati. Questa conservazione dei dati conforme alle norme è valida anche per Save-Server

#### Opzioni

- Per il database del server di salvataggio centrale è necessaria un'istanza di MS SQL Server. Il nostro team di assistenza sarà lieto di assistervi nell'installazione, nel setup e nella configurazione

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-10
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1360525
Modello precedente	SET-10-2021a
Numero di tariffa doganale	85234910

#### Option



### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

## FUNZIONI

Standard
----------

