

Software EasyTouch

SET-37

**Export  
Manager**

EasyTouch Export Manager – Ergebnisdaten automatisch und zuverlässig aus EasyTouch exportieren – z. B. zum Import in Ihr ERP-System

---

**CONTACT**






KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER

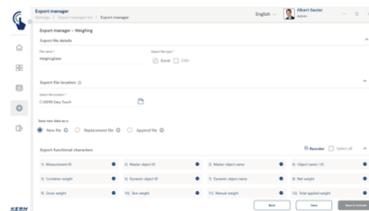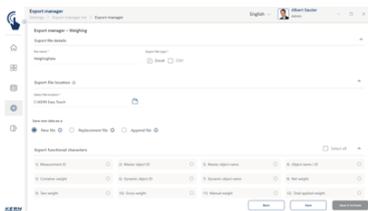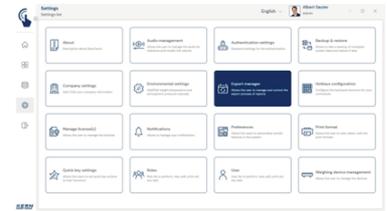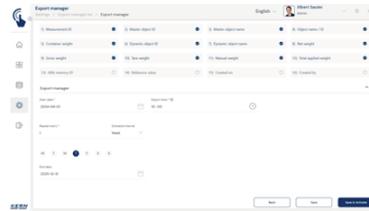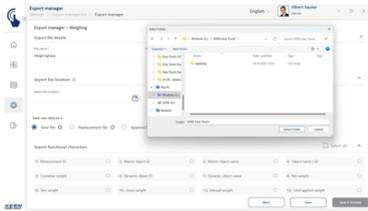

DEUTSCH

## BESCHREIBUNG

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Datenexport: Der Export Manager bietet einen automatischen Datenexport in einem individuell wählbaren Zeitintervall. Dabei werden unterschiedliche Dateiformate wie CSV oder XLSX unterstützt, um eine nahtlose Weiterverarbeitung der Daten, beispielsweise in ERP-, und PPS-Systemen zu ermöglichen
- Daten-Ablageort: Der Speicherort für exportierte Dateien kann frei definiert werden
- Datenfelder: Abhängig von der ausgewählten EasyTouch Funktion lassen sich die zu exportierenden Datenfelder frei bestimmen
- Exportintervalle: Zeitpunkte und Intervalle für die Exporte sind frei einstellbar, z. B. ein, oder mehrmals täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich zu festgelegten Zeiten
- Export-Historie: Mit Export-log Historie kann auf alle früheren Export-Dateien zugegriffen werden
- SaveServer: Nutzen Sie diese Funktion für einen Datenexport vom zentralen SaveServer
- Export-Datei-Varianten: Sie können zwischen verschiedenen Exportoptionen wählen:
  - a. Export in eine neue Datei
  - b. Export in die bestehende Datei

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | SET-37                      |
| Modell-Reihe           | ETS                         |
| Sortiment              | KERN                        |
| Produkt Segment        | Software                    |
| Produktgruppe          | EasyTouch                   |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/D<br>L |
| EAN-Code (Modell)      | 404576 1476523              |
| Zolltarifnummer        | 85234910                    |

### Technische Daten - Verpackung & Versand

|              |     |
|--------------|-----|
| Lieferzeiten | 1 d |
|--------------|-----|

## FUNKTIONEN

### Standard



### Option

