

BROCHURE PRODUIT

KERN SCD-4.0-PRO-DL-AS05

Date: 19.04.2025

FRANCAIS



Enregistrement ou transmission flexibles des valeurs mesurées, notamment vers Microsoft® Excel ou Access

CONTACT




KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com




Cliquez ici pour plus
 d'informations

VITRINE DES PRODUITS

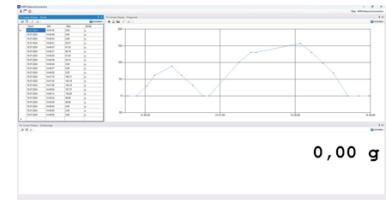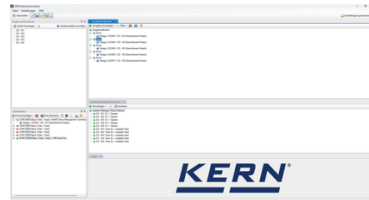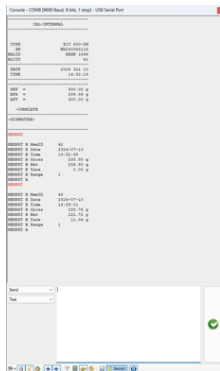

FRANCAIS

	Salz	Datum / Uhrzeit	Differenz	Abweichung	Gesamt			
4								
5	PSU 4200-2M	Vaseline	200 g	0,47 g	0,23%	200,47 g		
6	(große Mengen)	Alkohol	400 g	414,23 g	2023-09-07 12:15	11,21 g	2,80%	814,68 g
7		Wasser	3000 g	3,903,79 g	2023-09-07 12:15	2,29 g	-0,34%	3.604,07 g
8	ABU 80-AM	Drogenpulv	5,000 g	4,9993 g	2023-09-07 12:16	-0,0007 g	-0,01%	5,000,993 g
9	(kleine Mengen)	Thiodonamin	1,000 g	0,9996 g	2023-09-07 12:16	-0,0004 g	-0,10%	1,000,997 g
10		Boxen	0,001 g	0,0011 g	2023-09-07 12:17	0,0001 g	10,00%	1,020,058 g

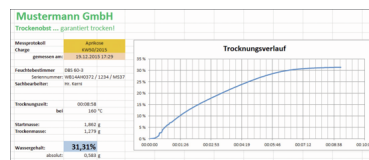

DESCRIPTION

- Pour système d'exploitation Windows 10, 11
- .NET Framework 4.8.1 requis
- Des droits d'administration complets sont nécessaires pour l'installation
- Prend en charge les balances et appareils de mesure avec USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, réseau LAN ou WiFi & # 160; (TCP/UDP/IP)
- Formatage et configuration ultra-flexibles de la sortie (ordre et positionnement, formatage et arrondi au choix), y compris sur demande enregistrement de la date et de l'heure pour chaque valeur transmise
- Raccordement d'un nombre illimité d'appareils/d'interfaces, y compris avec enregistrement simultané et synchronisé de plusieurs balances
- Interrogation à la demande (par touche) ou programmée des valeurs mesurées ou déclenchement de fonctionnalités, y compris pour l'enregistrement continu
- Les protocoles d'interface des balances KERN (configuration standard) sont déjà prédéfinis. Prise en charge possible d'autres balances grâce à la configuration flexible
- Câble d'interface adéquat inclus pour la commande simultanée d'une balance KERN

- Nombreuses possibilités de transmission et d'enregistrement :
 - MicrosoftR Excel/Access/Word à l'avant ou à l'arrière-plan
 - Autres applications Windows (simulation d'appui sur touches), par exemple logiciel d'expédition ou ERP (SAP, Sage,...)
 - Enregistrement de fichier (fichier texte ou CSV, par exemple)
 - Impression sur papier ou étiquette
- Caractéristiques supplémentaires de la version BalanceConnection PRO ::
 - Bases de données ODBC/SQL telles que SQL Server ou MySQL
 - Transmission à des services web HTTP/formulaires web
 - Histogramme
 - Relie les balances médicales aux systèmes informatiques du cabinet à l'aide du protocole de transfert de données des appareils (GDT) et du protocole HL7
 - Exécution de programmes/scripts via des lignes de commande librement configurables
 - Séquences de commandes
 - Définition de conditions pour certains événements, et réaction à ces derniers
 - Filtres pour détection de stabilité (les valeurs à valider peuvent être configurées)
 - Sauvegarde centralisée de la configuration, sur réseau par exemple
 - Affichages à l'écran avec interface utilisateur configurable pour une utilisation flexible de la balance
- Avantages
 - Le logiciel idéal lorsqu'il s'agit de transférer les données de pesée à un ordinateur sous Windows
 - Convient particulièrement à l'intégration professionnelle de systèmes de pesage dans des réseaux existants, répond aux exigences strictes en matière de transmission et de traitement automatisés des données et d'intégration de bases de données
 - Enregistrement automatique, p.ex. en cas d'essais permanents
 - Logiciel de laboratoire conforme BPL
 - Possibilité d'utiliser autant de balances que nécessaire par licence pour un PC/poste de travail
 - Possibilité d'utilisation dans tous les secteurs et toutes les applications
- Contenu de la livraison ; Lien de téléchargement pour 5 licences

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SCD-4.0-PRO-DL-AS05
Model-Serie	SCD
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel

Groupe de produits	BalanceConnection
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761488724
Modèle prédécesseur	SCD-4.0; SCD-4.0-PRO-S05; SCD-4.0S05
Numéro de tarif douanier	85234910

Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----