

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN SET-40

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch

SET-40
Protect

EasyTouch Protect – Proteger de forma segura y eficaz los datos confidenciales de la empresa

CONTACT



KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

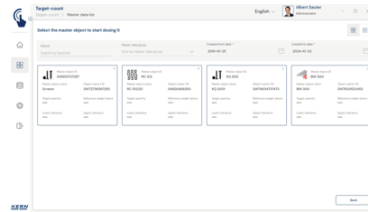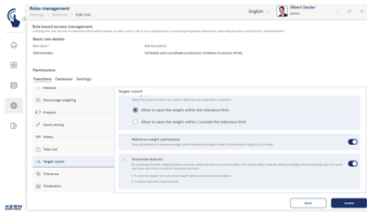

DESCRIPCIÓN

- Nota: El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base
- SET-40 Protect es compatible con los siguientes conjuntos: SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count y SET-31 Tolerance
- Protección de recetas confidenciales: Esta función permite ocultar todos los datos críticos de la receta para evitar el acceso no autorizado a los mismos
- Protección de datos de pesaje confidenciales: Al dosificar o pesar, los valores de peso objetivo se representan neutralizados con "***" para que sólo sea visible el resultado mostrado gráficamente basado en el valor objetivo y los valores de tolerancia inferior y superior
- Protección de nombres de objeto confidenciales: El nombre de una sustancia u objeto se enmascara para determinados grupos de usuarios, de modo que en el caso mínimo solo es visible el número de identificación de la sustancia sin valores del peso objetivo
- Opciones flexibles de protección de datos: Dependiendo de la función del usuario, puede seleccionar si solo deben mostrarse los valores del peso objetivo o también las denominaciones p. ej. de los distintos componentes de la receta
- Introducción de la cantidad objetivo total: En la pantalla de inicio, los usuarios introducen la cantidad objetivo total sin ver las cantidades objetivo individuales ni los pesos de los componentes
- Resultados enmascarados: En la pantalla de resultados, los pesos objetivo y los pesos realmente pesados también se muestran enmascarados solo como "***"
- Visualización de cantidad limitada en la memoria: En Memoria Dinámica, no se muestran cantidades para determinados grupos de usuarios
- Visualización transparente para los administradores: Los grupos de usuarios autorizados, como los administradores, pueden visualizar en cualquier momento las cantidades o los pesos deseados, así como los pesos realmente pesados

Opciones







- Función de almacenamiento de datos central Save Server (SET-10) para guardar adicionalmente todos los datos de medición en un directorio central y local del servidor. Aquí se guardan los datos de medición de todos los sistemas de pesaje EasyTouch conectados, así como de todas las funciones EasyTouch que haya instaladas. Especialmente los usuarios con varios sistemas de pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos los datos de pesaje consolidados en una sola base de datos, pudiendo buscar en una única tabla los distintos datos de medición de varias balanzas. Los datos guardados en la memoria de Save Server están también a salvo de manipulaciones y no se pueden modificar
- Save-Cloud: Tiene, al igual que el Servidor seguro, la misma función de memoria central de datos de todos los sistemas ET conectados. La diferencia es que en Save-Data Cloud, la memoria está ubicada en un servidor de KERN accesible vía Internet, en vez de en un servidor de la red local. La ventaja de Save-Data Cloud consiste en que la instalación se realiza automáticamente y no se requiere ningún administrador de red, KERN SET-101
- EasyTouch Quick Key (SET-311): Esta función permite reservar determinados objetos de datos maestros para ciertos roles de usuario. Los objetos seleccionados se muestran a estos usuarios en la pantalla como botones de acceso rápido

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SET-40
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1476547
Número del arancel aduanero	85234910

FUNCIONES

Standard
   
Option
 

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----