

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
SET-16**

Data: 19.04.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-16

**Batch and
Statistics**

EasyTouch Batch and Statistics – Misurazioni dei lotti con analisi statistica e funzione di stampa unificata

CONTACT





KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI

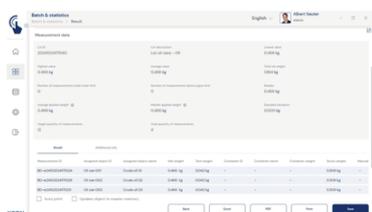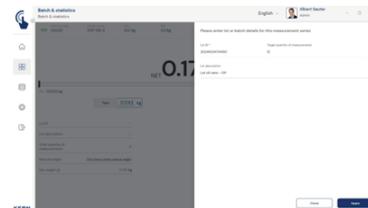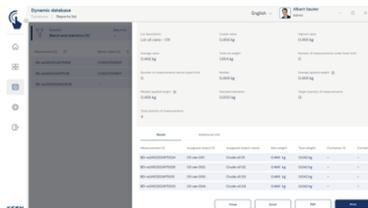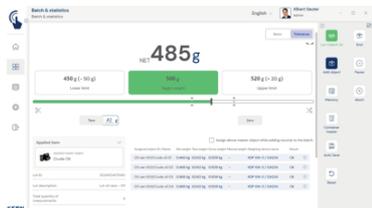

ITALIANO

DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Batch and Statistics serve a pesare un gruppo di elementi in riferimento alla denominazione identificativa di un gruppo, per es. diversi articoli di un lotto di produzione/ ID di un batch. Tutti gli elementi di questo gruppo possono essere stampati in un modulo. Il sistema calcola automaticamente i codici di riferimento statistici centrali
- I codici di riferimento statistici sono calcolati sempre dai pesi netti di tutti gli elementi di un gruppo. Essi sono: il numero totale delle pesate all'interno di questo gruppo, il peso netto medio di tutti gli elementi all'interno di questo gruppo, la media (il valore centrale) di tutti gli elementi all'interno di questo gruppo, la deviazione standard dei valori misurati all'interno di questo gruppo, il valore misurato più piccolo all'interno di questo gruppo, il valore misurato più grande all'interno di questo gruppo
- Tutti i dati di misura sono stampati con i valori del relativo peso netto, lordo e tara. I valori misurati possono essere determinati su diverse bilance. Nella stampa è perciò indicata anche la bilancia in questione, sulla quale sono stati rilevati i rispettivi valori misurati
- Tutti i valori misurati sono salvati singolarmente con riferimento al numero centrale di lotto. Inoltre tutti gli oggetti possono essere designati singolarmente con numero ID e nome ID individuale

- Tutti i valori misurati sono stampati in modo chiaro in un protocollo centrale e con tutti i relativi dettagli
- Utilizzo tipico per la determinazione delle quantità di riempimento di prodotti finiti
- Protezione con ID: Consente di salvare ogni risultato di pesata pesato e memorizzato con un numero ID (Dynamic Object ID) univoco e un nome ID (Dynamic Object Name), ad esempio, utilizzando uno scanner di codici a barre. Il salvataggio può avvenire in modo semiautomatico o completamente automatico e sempre dopo aver scaricato e caricato nuovamente la bilancia. Ciò significa che l'utente non deve premere nessun tasto per il salvataggio delle misure e può lavorare in modo efficiente
- Pausa: i controlli di inventario completi possono essere messi in pausa in qualsiasi momento, memorizzati temporaneamente e ripresi successivamente
- Gli errori di misurazione possono essere facilmente cancellati
- Modalità Tolerance: consente di integrare le singole pesate con una funzione di tolleranza. Ciò vuol dire che per ogni singola pesata si controlla se il rispettivo valore misurato si trovi all'interno o al di fuori della tolleranza definita
- Risultato in modalità Tolerance con visualizzazione per cui i rispettivi valori misurati si trovino all'interno o al di fuori della tolleranza
- Funzione memoria allarmi: nel caso in cui EasyTouch venga chiuso inavvertitamente, mentre è in corso una serie di misurazioni con statistica del lotto, i dati aperti vengono salvati automaticamente. In un secondo momento sarà possibile riaprire la serie di misurazioni e proseguire il lavoro

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-16
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761360563
Modello precedente	SET-16-2021a
Numero di tariffa doganale	85234910

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



Option



SOFTWARE

Modello	Descrizione
SET-261	KERN EasyTouch SET-261 Audio Management
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print
SET-40	KERN EasyTouch SET-40 Protect
SET-411	KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys