

Software EasyTouch

SET-06

Classification

EasyTouch Classification – Funzione di classificazione

CONTACT




KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI

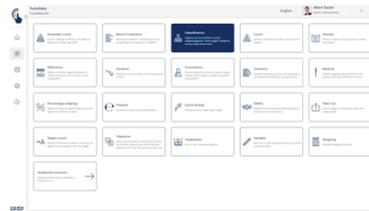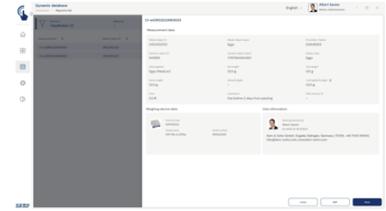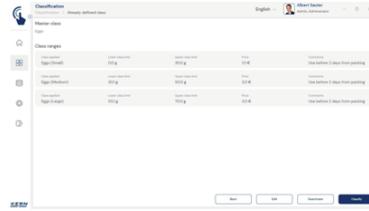

ITALIANO

DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Il compito della funzione di classificazione è quello di classificare gli oggetti da pesare in classi di peso specifiche e liberamente definibili. In questo modo è possibile ordinare gli oggetti in modo semplice e comodo senza che l'utente debba leggere e interpretare i risultati della pesata
- Rappresentazione del risultato di classificazione: Nel risultato viene riportata la corretta classe di peso riferito all'oggetto attuale da pesare viene visualizzata in chiaro. Inoltre, la classe di peso attuale viene evidenziata come un campo colorato e il risultato della pesata all'interno del campo della classe di peso viene visualizzato supportato visivamente da una piccola freccia, simile ad una visualizzazione a barre
- L'inserimento delle classi di tolleranza avviene comodamente con denominazioni per le singole classi (che possono anche essere contate automaticamente) con valore di tolleranza inferiore e superiore, eventualmente con prezzo e un commento specifico per ogni classe. In alternativa si possono selezionare anche denominazioni predefinite per le classi e correderle di valori limite specifici
- Classi continue possibili: I limiti di classe da 0 fino a un valore target o da un valore target all'infinito possono essere scelti come limiti di classe. Allo stesso modo si possono impostare limiti di classe con lacune. Queste lacune sono trattate come „senza classe“

- **Memoria centrale dati base:** Gli oggetti da classificare possono essere archiviati nella memoria del sistema con profilo di classificazione, nome della classe, valore di tolleranza inferiore e superiore, eventualmente prezzo e commento per ogni classe, numero ID e nome ID, immagine ecc. Così non è necessario inserire ogni volta questi valori daccapo, bensì li si può comodamente recuperare dalla memoria. Nella memoria dati base è possibile archiviare anche un possibile valore della tara per l'imballaggio consueto, la scatola o il contenitore, detto valore della tara sarà poi automaticamente detratto dal risultato di pesata (PreTare)
- **Protezione con ID:** Consente di salvare ogni risultato di pesata pesato e memorizzato con un numero ID (Dynamic Object ID) univoco e un nome ID (Dynamic Object Name). Il salvataggio può avvenire in modo semiautomatico o completamente automatico e sempre dopo aver scaricato e caricato nuovamente la bilancia. Ciò significa che l'utente non deve premere nessun tasto per il salvataggio delle misure e può lavorare in modo efficiente
- **Funzione stampa da PC e funzione scansione codice a barre:** Tramite KERN EasyTouch in ambiente Windows® oppure Android™ è possibile sfruttare appieno l'infrastruttura di PC/tablet e accessori. In particolare le stampanti standard per Windows e le stampanti per etichette per PC possono stampare grandi certificati di conteggio o etichette adesive compatte con il risultato del conteggio, a seconda delle preferenze individuali impostate

Opzioni

- **Funzione di salvataggio dati centralizzata Save Server (SET-10)** per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di misurazione in una server directory locale centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte le app EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-06
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi

Codice EAN (Modello)	4045761360495
----------------------	---------------

Modello precedente	SET-06-2021a
--------------------	--------------

Numero di tariffa doganale	85234910
----------------------------	----------

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



Option



SOFTWARE

Modello	Descrizione
SET-311	KERN EasyTouch SET-311 Quick Key
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print