

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN SCD-4.0-DLS05

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL



Registro flexible o transmisión de valores datos, especialmente a Excel o Access de Microsoft®.

CONTACT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

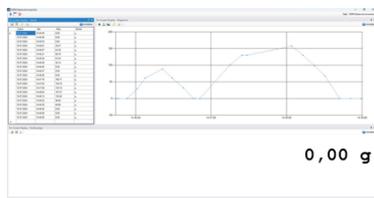

Subst	Menge	Datum / Uhrzeit	Differenz	Abweichung	Gesamt
Vaseline	200 g	2023-05-07 12:28	0,47 g	0,23%	200,47 g
(große Mengen) Alkohol	400 g	2023-05-07 12:28	11,21 g	2,80%	411,68 g
Wasser	2000 g	2023-05-07 12:28	2,39 g	0,12%	1.654,57 g
(kleine Mengen) Dropropin	1,000 g	2023-05-07 12:28	-0,007 g	-0,01%	1,623,063 g
(kleine Mengen) Theobromin	1,000 g	2023-05-07 12:28	-0,0025 g	-0,18%	1,620,067 g
Rezept	0,000 g	2023-05-07 12:28	0,0001 g	100,00%	1,620,068 g



ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

- Para los sistemas operativos Windows 10, 11
- Se requiere .NET Framework 4.8.1
- Se requieren derechos de administración completos para la instalación
- Compatible con balanzas e instrumentos de medición con USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, red LAN o WiFi (TCP/UDP/IP)
- Gran flexibilidad de formatos y diseño de salida (en cualquier orden, posicionamiento, formato y redondeo), sobre todo y opcionalmente, se puede registrar la fecha y la hora para cada valor transmitido.
- Se puede conectar cualquier número de dispositivos/ interfaces, así como registrar varias balanzas de forma simultánea y sincronizada.
- Consultas por teclado y programadas por tiempo de valores medidos o activación de funciones del dispositivo, también para registros permanentes.
- Los protocolos de interfaces de las balanzas KERN vienen predefinidos (configuración estándar).
Compatibilidad con otras balanzas gracias a una configuración flexible.
- El cable de interfaz correspondiente se incluye al pedir la balanza

- Muchas y diversas posibilidades de registro y transmisión:
 - MicrosoftR Excel / Access / Word en primer o segundo plano
 - Otras aplicaciones de Windows (con teclado de software), como p. ej. programas de expedición o sistemas ERP (SAP, Sage, ...)
 - Registro de archivo (p. ej. como texto o archivo CSV)
 - Transferencia a servicios Web HTTP/formularios de la red
- Salida de pantalla como indicación de gran tamaño, diagrama de evolución (curva de secado, determinador de humedad),...
- : Beneficios
 - Se evitan errores tipográficos como, p. ej., los producidos por la transferencia manual
 - Registro automático, p. ej. en ensayos de larga duración
 - Software de laboratorio que cumple con los requisitos de GLP
 - Se puede utilizar en cualquier aplicación y sector económico
- Alcance de suministro: Enlace de descarga para 5 licencias

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SCD-4.0-DLS05
Serie de modelos	SCD
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	BalanceConnection
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761488700
Modelo predecesor	SCD-4.0S05
Número del arancel aduanero	85234910

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

SERVICIOS

Modelo	Descripción
970-105	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-105