

BROCHURE PRODUIT

**KERN
SET-40**

Date: 19.04.2025

FRANCAIS

Software EasyTouch

SET-40

Protect

EasyTouch Protect – Protéger fiablement et efficacement les données sensibles de l'entreprise

CONTACT



KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS

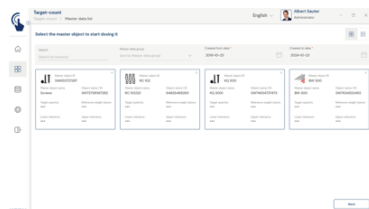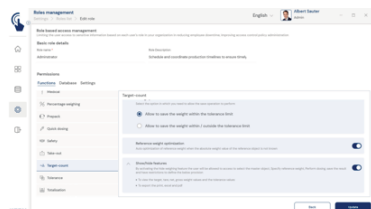

DESCRIPTION

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- SET-40 Protect est compatible avec les kits suivants : SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count et SET-31 Tolerance
- Protection des recettes sensibles : cette fonction permet de masquer toutes les données de recettes critiques afin d'éviter tout accès intempestif à celles-ci
- Protection des données de pesée sensibles : lors du dosage ou de la pesée, les valeurs de pesée cibles sont neutralisées par « *** », pour que seul le résultat représenté graphiquement sur la base de la valeur cible et des valeurs de tolérance basses et hautes soit visible
- Protection des noms d'objets sensibles : le nom d'une substance ou d'un objet est masqué pour certains groupes d'utilisateurs, de sorte que dans le cas le plus restrictif, seul l'ID de la substance est visible, sans valeur de pesée cible
- Options souples de protection des données : selon le rôle utilisateur, il est possible de choisir si seules les valeurs de pesée cibles doivent être affichées ou si, par exemple, les désignations des différents composants de la recette doivent également être affichées
- Saisie de la quantité cible totale : sur l'écran d'accueil, les utilisateurs saisissent la quantité cible totale sans voir les quantités cibles individuelles ni le poids des composants
- Résultats masqués : dans l'écran des résultats, les poids cibles et les poids réellement pesés ne sont affichés que masqués par « *** »
- Affichage limité des quantités dans la mémoire : dans Dynamic Memory, certains groupes d'utilisateurs ne voient pas les quantités
- Affichage transparent pour les admins : l'affichage en texte clair des quantités ou des poids cibles ainsi que des poids effectivement pesés est possible à tout moment pour les groupes d'utilisateurs autorisés comme les administrateurs

Options

- Fonction de mémoire de données centrale Save Server (SET-10) pour l'enregistrement supplémentaire de toutes les données de mesure dans un répertoire serveur central local. Les données de mesure de tous les systèmes de pesée EasyTouch raccordés et de toutes les applis EasyTouch installées y sont stockées. Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les données de pesée dans une même base de données et de rechercher les données individuelles de différentes balances dans un même tableau. L'enregistrement des données Save Server est également protégé contre les modifications et les falsifications
- Save-Cloud : A la même fonction de mémoire de données centrale de tous les systèmes ET raccordés que Save-Data Server. La différence est que dans Save-Data Cloud, l'emplacement d'enregistrement est un serveur KERN accessible par Internet plutôt qu'un serveur sur un réseau local. L'avantage de Save-Data Cloud est que l'installation est totalement automatique et n'exige pas d'administrateur réseau, KERN SET-101
- EasyTouch Quick Key (SET-311) : Cette fonction permet de réserver certains objets de données de base à certains rôles d'utilisateur. Les objets sélectionnés sont présentés à ces utilisateurs comme des touches d'accès rapide à l'écran

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SET-40
Model-Serie	ETS
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	EasyTouch
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1476547
Numéro de tarif douanier	85234910

Standard



Option



Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS