

**FOLLETO DEL PRODUCTO**

---

**KERN  
SET-18**

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch

SET-18

**Container  
Master**

EasyTouch Container Master – Gestión centralizada de contenedores

---

**CONTACT**





KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS

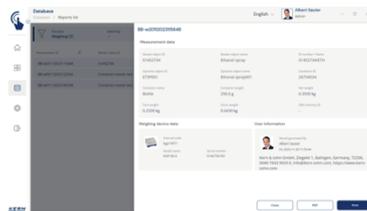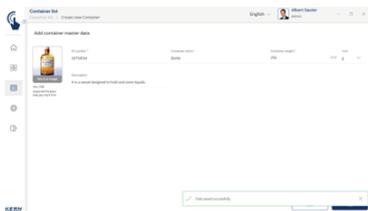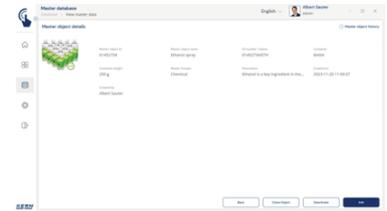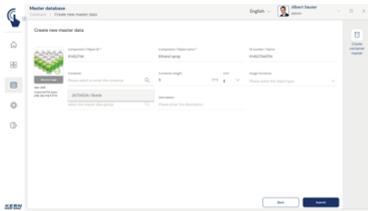

ESPAÑOL

## DESCRIPCIÓN

- Nota: El requisito para este set es el programa básico SET-01 Base
- Gestión de contenedores: Los distintos artículos se almacenan y pesan en contenedores del mismo tipo. Los pesos de tara de estos contenedores pueden gestionarse de forma centralizada con SET-18 Container Master. Si el peso de un contenedor cambia, el nuevo peso de tara se actualiza sencillamente en Container Master y se aplica automáticamente a todos los artículos y funciones asociados de la aplicación
- Asignación fija: Se puede asignar permanentemente un contenedor a cada objeto de datos maestros para garantizar su coherencia
- Visualización de contenedores: Cuando se utiliza un objeto de datos maestros, los usuarios ven en EasyTouch el contenedor asignado permanentemente o un contenedor seleccionado manualmente. Esto reduce el riesgo de confusiones y mejora la precisión del proceso de trabajo
- Selección de contenedores: Los usuarios también pueden seleccionar un contenedor directamente durante el proceso de pesaje sin especificación previa, por ejemplo, escaneando la identificación del contenedor mediante un código de barras. Esto contribuye a evitar entradas de tara incorrectas

## ESPECIFICACIONES

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SET-18
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1478312
Número del arancel aduanero	85234910

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

## FUNCIONES

Standard



Option

