

BROCHURE PRODUIT

KERN SCD-4.0-DLS05

Date: 19.04.2025

FRANCAIS



Enregistrement ou transmission flexibles des valeurs mesurées, notamment vers Microsoft® Excel ou Access

CONTACT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
 d'informations

VITRINE DES PRODUITS

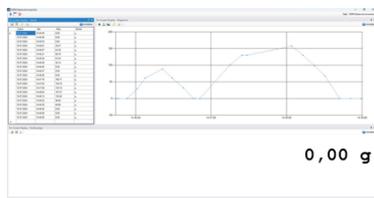

Subst	Menge	Datum / Uhrzeit	Differenz	Abweichung	Gesamt
Vaseline	200 g	2023-05-07 12:28	0,47 g	0,23%	200,47 g
Alkohol	400 g	2023-05-07 12:28	11,21 g	2,80%	411,21 g
Wasser	2000 g	2023-05-07 12:28	2,39 g	0,12%	2002,39 g
Dropoprin	1,000 g	2023-05-07 12:28	-0,007 g	-0,01%	0,993 g
Theobromin	1,000 g	2023-05-07 12:28	-0,0025 g	-0,03%	0,9975 g
Stärke	0,001 g	2023-05-07 12:28	0,0001 g	100,00%	0,0011 g



FRANCAIS

DESCRIPTION

- Pour système d'exploitation Windows 10, 11
- .NET Framework 4.8.1 requis
- Des droits d'administration complets sont nécessaires pour l'installation
- Prend en charge les balances et appareils de mesure avec USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, réseau LAN ou WiFi & #160;(TCP/UDP/IP)
- Formatage et configuration ultra-flexibles de la sortie (ordre et positionnement, formatage et arrondi au choix), y compris sur demande enregistrement de la date et de l'heure pour chaque valeur transmise
- Raccordement d'un nombre illimité d'appareils/d'interfaces, y compris avec enregistrement simultané et synchronisé de plusieurs balances
- Interrogation à la demande (par touche) ou programmée des valeurs mesurées ou déclenchement de fonctionnalités, y compris pour l'enregistrement continu
- Les protocoles d'interface des balances KERN (configuration standard) sont déjà prédéfinis. Prise en charge possible d'autres balances grâce à la configuration flexible
- Câble d'interface adéquat inclus pour la commande simultanée d'une balance KERN

- Nombreuses possibilités de transmission et d'enregistrement :
 - Microsoft Excel/Access/Word à l'avant ou à l'arrière-plan
 - Autres applications Windows (simulation d'appui sur touches), par exemple logiciel d'expédition ou ERP (SAP, Sage,...)
 - Enregistrement de fichier (fichier texte ou CSV, par exemple)
 - Impression sur papier ou étiquette
- Sorties à l'écran telles que grand affichage, diagramme d'évolution (courbe de séchage des analyseurs d'humidité), histogramme,...
- : Avantages
 - Pas d'erreurs de frappe comme p.ex. en cas de transmission manuelle
 - Enregistrement automatique, p.ex. en cas d'essais permanents
 - Logiciel de laboratoire conforme BPL
 - Possibilité d'utilisation dans tous les secteurs et toutes les applications
- Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SCD-4.0-DLS05
Model-Serie	SCD
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	BalanceConnection
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1488700
Modèle prédécesseur	SCD-4.0S05
Numéro de tarif douanier	852349 10

Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

SERVICES

Modèle	Description
970-105	Extension de garantie KERN (+2 ans) 970-105