

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN SCD-4.0-PRO-DL-AS05

Data: 19.04.2025

ITALIANO



Registrazione o trasmissione flessibile dei valori di misurazione, in particolare anche con Microsoft® Excel o Access

CONTACT




KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com




Scansiona qui per maggiori informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI

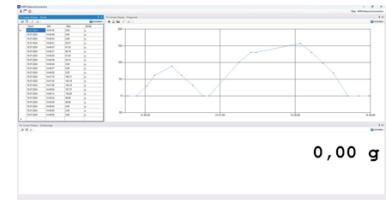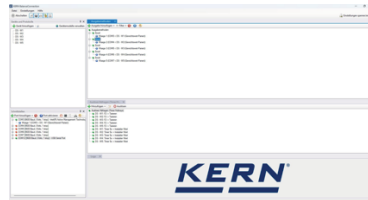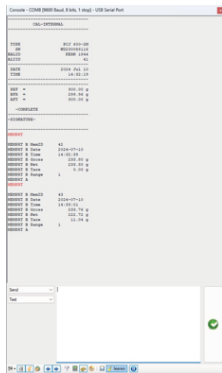

ITALIANO

	Sal	Daten / Uhrzeit	Differenz	Abweichung	Gesamt
4					
5	200 g	2023-05-07 12:15	0,47 g	0,23%	200,47 g
6	800 g	2023-05-07 12:15	11,21 g	2,30%	811,68 g
7	3000 g	2023-05-07 12:15	2,29 g	-0,34%	3.002,97 g
8	5.000 g	2023-05-07 12:16	-0,007 g	-0,01%	5.000,993 g
9	1.000 g	2023-05-07 12:16	-0,0034 g	-0,18%	1.000,997 g
10	0,001 g	2023-05-07 12:17	0,0001 g	10,00%	1.020,0568 g

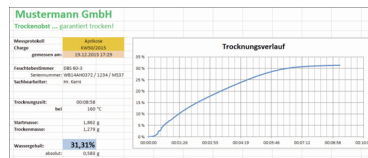

DESCRIZIONE

- Per sistemi operativi Windows 10, 11
- È richiesto .NET Framework 4.8.1
- Per l'installazione sono necessari i diritti di amministrazione completi
- Supporta bilance e strumenti di misurazione con USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, rete LAN oppure WiFi (TCP/UDP/IP)
- Massima flessibilità di formattazione e strutturazione della stampa (sequenza e posizionamento a piacere, formattazione e arrotondamento), in particolare su richiesta anche registrazione di data e ora per ogni valore trasmesso
- Numero discrezionale di apparecchi/interfacce collegabili, anche registrazione contemporanea e sincronizzata di più bilance
- Richiesta mediante tasti o temporizzata di valori di misurazione o attivazione di funzioni dell'apparecchio anche per registrazioni continue
- I protocolli di interfaccia delle bilance KERN (configurazione standard) sono già predefiniti. Possibilità di supportare altre bilance grazie alla configurazione flessibile

- Il rispettivo cavo d'interfaccia è compreso ordinando contemporaneamente una bilancia KERN
- Varie e numerose possibilità di trasmissione e registrazione:
 - MicrosoftR Excel/Access/Word in primo piano o di sfondo
 - Altra applicazione Windows (tramite simulazione tasti), p. es. software di spedizioni o sistema ERP (SAP, Sage,...)
 - Archiviazione file (p. es. come testo o come file CSV)
 - Stampa su stampante per testi o per etichette
- Caratteristiche supplementari della BalanceConnection Versione PRO::
 - Banche dati ODBC/SQL come server SQL o MySQL
 - Trasferimento a HTTP Web services/web-forms
 - Istogramma
 - Consente il collegamento di bilance mediche ai sistemi informatici dell'ambulatorio tramite il protocollo di trasferimento dati dell'apparecchio (GDT) e il protocollo HL7
 - Esecuzione di programmi/script tramite righe di comando liberamente definibili
 - Sequenze di comandi
 - Definizione delle condizioni (conditions) per determinati eventi e reazione agli stessi
 - Filtro per il riconoscimento della stabilità (rilevamento valore configurabile)
 - Gestione centrale delle configurazioni software, per es. in una memoria in rete
 - Display On-screen con interfaccia utente configurabile per il controllo flessibile della bilancia
- Vantaggi
 - Software ideale se si devono trasmettere i dati di pesata rilevati a un PC Windows
 - Particolarmente adatto per l'integrazione professionale di sistemi di pesata nelle reti preesistenti, ove vi sia una maggiore necessità di rilevamento automatico dei dati e loro trattamento per l'integrazione di banche dati
 - Registrazione automatica, per es. per prove di durata
 - Software di laboratorio conforme alle indicazioni GLP
 - Per ogni licenza si possono utilizzare tutte le bilance possibili su un PC / una postazione di lavoro
 - Utilizzabile ad ampio spettro per settore e applicazione
- Materiale in dotazione: Link per scaricare 5 licenze

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SCD-4.0-PRO-DL-AS05
Modello-Serie	SCD
Assortimento	KERN

Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	Connessione bilancia
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761488724

Modello precedente SCD-4.0; SCD-4.0-
PROS05; SCD-4.0S05

Numero di tariffa
doganale 85234910

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna 1 d