

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
SET-52**

Data: 19.04.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-52

Inventory

EasyTouch Inventory – Inventari efficiente e corretti

CONTACT





KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI

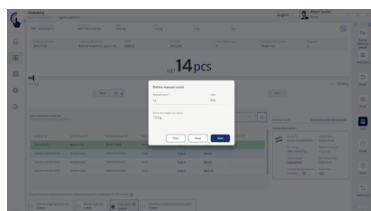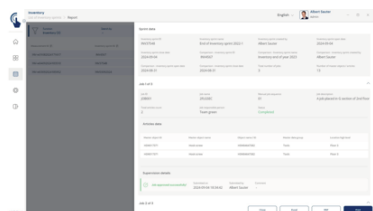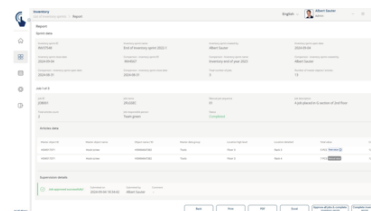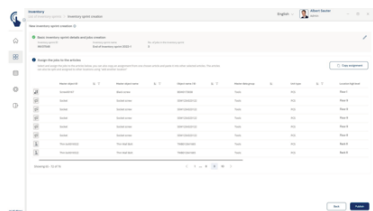

DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set sono il programma base SET-01 Base e SET-32 Count
- ET Inventory: SET-52 Inventory è un programma di assistenza e un database che consente anche agli utenti senza conoscenze preliminari di eseguire processi di inventario in modo rapido e senza errori. Gli utenti si concentrano esclusivamente sull'identificazione degli oggetti dell'inventario, ad esempio tramite la scansione dei codici a barre, mentre il programma gestisce autonomamente l'intero processo di conteggio
- Procedura semplice: Il processo è molto semplice: Eseguire la scansione del codice a barre, posizionare l'oggetto sulla bilancia, fine. Si passa poi direttamente all'articolo successivo
- Organizzazione dell'inventario: Ogni inventario può essere suddiviso in diversi "lavori", a seconda del luogo di stoccaggio, del gruppo di prodotti, ecc. Ogni lavoro di inventario viene eseguito, completato e salvato individualmente. In questo modo è possibile suddividere grandi inventari in utili aree parziali e farle elaborare da team diversi
- Processo di autorizzazione: Gli inventari possono essere dotati di un processo di autorizzazione, affinché che i risultati debbano essere approvati da un ruolo utente autorizzato una volta completato il processo
- Elenco degli inventari: EasyTouch genera un elenco chiaro di tutti gli articoli registrati con il relativo conteggio delle scorte, per confrontare ad esempio l'inventario attuale con quello dell'anno precedente. Il sistema

calcola quindi automaticamente le differenze di magazzino tra i due inventari

- ERP Connect: Questa estensione opzionale consente, ad esempio, di importare gli elenchi dell'inventario da sistemi di gestione merci esistenti e di esportarvi i risultati, come i livelli attuali delle scorte
- Pesare e contare: Il valore delle scorte può essere ricavato dalla bilancia come risultato del conteggio, inserito manualmente o ricavato da un inventario comparativo
- Importazione dei dati: I dati anagrafici degli articoli di inventario possono essere importati in EasyTouch tramite un'interfaccia da un sistema ERP o tramite un elenco Excel

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato



Modello codice articolo	SET-52
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761486362
Numero di tariffa doganale	85234910

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



Option

SOFTWARE

Modello	Descrizione
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print