

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN SCD-4.0-PRO-DL-AS05

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL



Registro flexible o transmisión de valores datos, especialmente a Excel o Access de Microsoft®.

CONTACT




KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com




Escanear aquí para más información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS

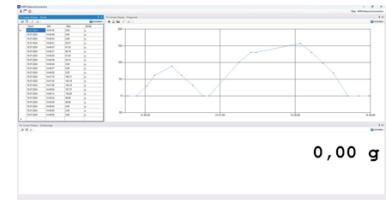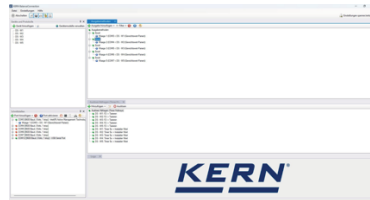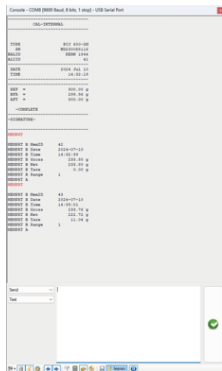

Sl	Subst	Salz	Datum / Uhrzeit	Differenz	Abweichung	Gesamt		
4	PHU 4200-2M	Vaseline	2007 g	300,47 g	2023-05-07 12:15	0,47 g	0,23%	200,47 g
5	(große Mengen)	Alkohol	400 g	412,23 g	2023-05-07 12:15	12,23 g	2,30%	612,68 g
7		Wasser	3000 g	3300,79 g	2023-05-07 12:15	2,79 g	0,24%	3.604,07 g
8	ABU 80-AM	Drogenpulv	5,000 g	4,9993 g	2023-05-07 12:16	-0,0007 g	-0,01%	1.613,0993 g
9	(kleine Mengen)	Thiodonamin	1,000 g	0,9998 g	2023-05-07 12:16	-0,0002 g	-0,10%	1.620,0977 g
10		Bottle	0,001 g	-0,0011 g	2023-05-07 12:17	0,0001 g	10,00%	1.620,0958 g

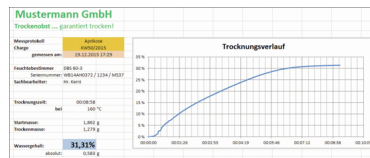

DESCRIPCIÓN

- Para los sistemas operativos Windows 10, 11
- Se requiere .NET Framework 4.8.1
- Se requieren derechos de administración completos para la instalación
- Compatible con balanzas e instrumentos de medición con USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, red LAN o WiFi (TCP/UDP/IP)
- Gran flexibilidad de formatos y diseño de salida (en cualquier orden, posicionamiento, formato y redondeo), sobre todo y opcionalmente, se puede registrar la fecha y la hora para cada valor transmitido.
- Se puede conectar cualquier número de dispositivos/ interfaces, así como registrar varias balanzas de forma simultánea y sincronizada.
- Consultas por teclado y programadas por tiempo de valores medidos o activación de funciones del dispositivo, también para registros permanentes.
- Los protocolos de interfaces de las balanzas KERN vienen predefinidos (configuración estándar). Compatibilidad con otras balanzas gracias a una configuración flexible.
- El cable de interfaz correspondiente se incluye al pedir la balanza

- Muchas y diversas posibilidades de registro y transmisión:
 - MicrosoftR Excel / Access / Word en primer o segundo plano
 - Otras aplicaciones de Windows (con teclado de software), como p. ej. programas de expedición o sistemas ERP (SAP, Sage, ...)
 - Registro de archivo (p. ej. como texto o archivo CSV)
 - Transferencia a servicios Web HTTP/formularios de la red
- Características adicionales de la versión BalanceConnection PRO::
 - Base de datos ODBC / SQL como servidor SQL o MySQL
 - Transferencia a servicios Web HTTP / formularios de la red
 - Histograma
 - Permite conectar balanzas médicas a los sistemas informáticos de consultas médicas mediante el protocolo de GDT de transferencia de datos a periféricos, así como con el protocolo HL7
 - Ejecución de programas, scripts mediante líneas de comandos de libre definición
 - Secuencias de comandos
 - Definición de las condiciones (conditions) para determinados eventos y la reacción a ellos
 - Filtro para detección de estabilidad (transferencia configurable de los valores)
 - Mantenimiento y gestión central de la configuración, p. ej. en la red
 - Indicaciones en pantalla con interfaz del usuario configurable para un manejo flexible de la balanza
- Beneficios
 - El programa ideal cuando se trata de transferir los datos de pesaje captados a un ordenador con Windows
 - Especialmente adecuado para la integración profesional de los sistemas de pesaje en redes existentes con una elevada exigencia a la transferencia y procesamiento automatizados de los datos, para la conexión de bases de datos
 - Registro automático, p. ej. en ensayos de larga duración
 - Software de laboratorio que cumple con los requisitos de GLP
 - Con una licencia se pueden utilizar tantas balanzas como se quiera en un ordenador o estación de trabajo
 - Se puede utilizar en cualquier aplicación y sector económico
- Alcance de suministro: Enlace de descarga para 5 licencias

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SCD-4.0-PRO-DL-AS05
Serie de modelos	SCD
Surtido	KERN

Tipo de producto	Software
Grupo de productos	BalanceConnection
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761488724
Modelo predecesor	SCD-4.0; SCD-4.0-PROS05; SCD-4.0S05

Número del arancel aduanero	85234910
--------------------------------	----------

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----