


## FOLLETO DEL PRODUCTO

# KERN SCD-4.0-DL

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL

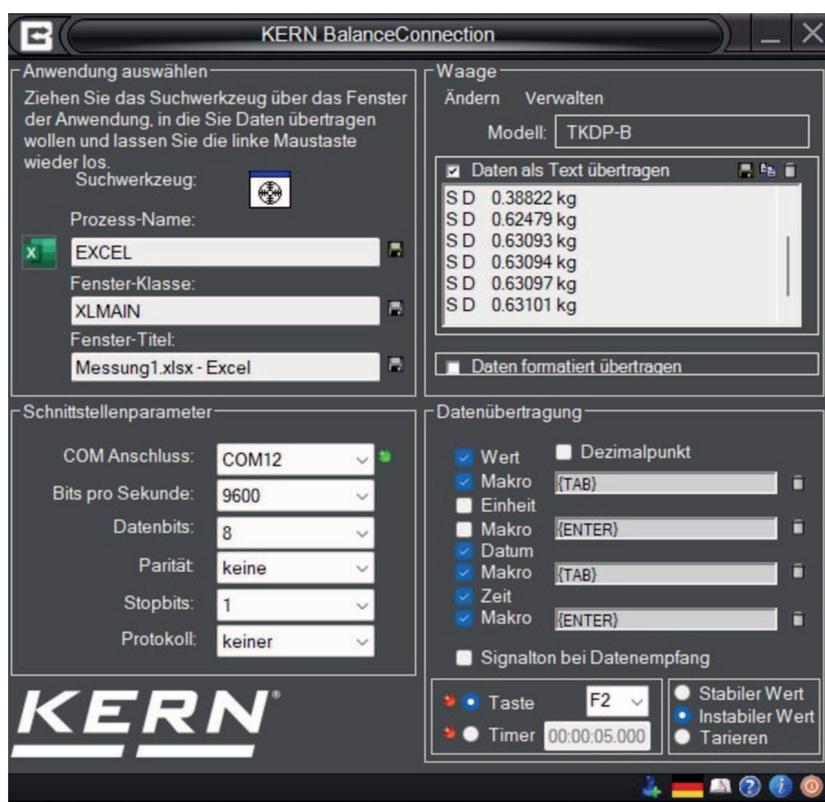

Registro flexible o transmisión de valores datos, especialmente a Excel o Access de Microsoft®.

## CONTACT




KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : info@kern-sohn.com  
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS

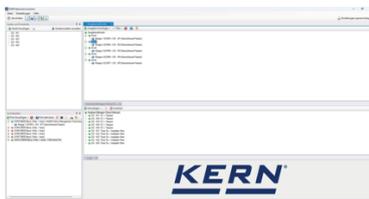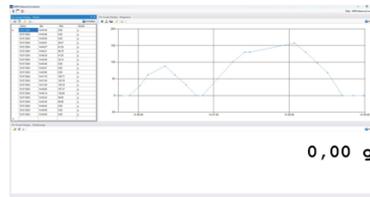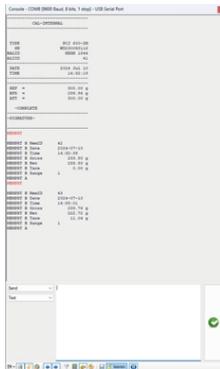

	Menge	Name	Datum / Uhrzeit	Differenz	Abweichung	Gesamt
4	1,000 g	Vaseline	2023-05-27 12:11	0,47 g	0,23%	200,47 g
6	400 g	Alkohol	2023-05-27 12:11	11,21 g	2,80%	811,69 g
7	3,000 g	Wasser	2023-05-27 12:11	3,29 g	0,34%	1.614,67 g
8	5,000 g	Dropropidin	2023-05-27 12:11	-0,007 g	-0,01%	1.613,969 g
9	1,000 g	Thiodonin	2023-05-27 12:11	-0,016 g	-0,16%	1.620,967 g
10	0,001 g	Boxe	2023-05-27 12:11	0,0001 g	10,00%	1.620,968 g

ESPAÑOL

## DESCRIPCIÓN

- Para los sistemas operativos Windows 10, 11
- Se requiere .NET Framework 4.8.1
- Se requieren derechos de administración completos para la instalación
- Compatible con balanzas e instrumentos de medición con USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, red LAN o WiFi (TCP/UDP/IP)
- Gran flexibilidad de formatos y diseño de salida (en cualquier orden, posicionamiento, formato y redondeo), sobre todo y opcionalmente, se puede registrar la fecha y la hora para cada valor transmitido.
- Se puede conectar cualquier número de dispositivos/ interfaces, así como registrar varias balanzas de forma simultánea y sincronizada.
- Consultas por teclado y programadas por tiempo de valores medidos o activación de funciones del dispositivo, también para registros permanentes.
- Los protocolos de interfaces de las balanzas KERN vienen predefinidos (configuración estándar).  
Compatibilidad con otras balanzas gracias a una configuración flexible.
- El cable de interfaz correspondiente se incluye al pedir la balanza

- Muchas y diversas posibilidades de registro y transmisión:
  - MicrosoftR Excel / Access / Word en primer o segundo plano
  - Otras aplicaciones de Windows (con teclado de software), como p. ej. programas de expedición o sistemas ERP (SAP, Sage, ...)
  - Registro de archivo (p. ej. como texto o archivo CSV)
  - Transferencia a servicios Web HTTP/formularios de la red
- Salida de pantalla como indicación de gran tamaño, diagrama de evolución (curva de secado, determinador de humedad),...
- Beneficios:
  - Se evitan errores tipográficos como, p. ej., los producidos por la transferencia manual
  - Registro automático, p. ej. en ensayos de larga duración
  - Software de laboratorio que cumple con los requisitos de GLP
  - Se puede utilizar en cualquier aplicación y sector económico
- Alcance de suministro: Enlace de descarga para 1 licencia

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SCD-4.0-DL
Serie de modelos	SCD
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	BalanceConnection
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761212206
Modelo predecesor	SCD-4.0; SCD-4.0S05
Número del arancel aduanero	85234910

### FUNCIONES

Standard



### Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----