

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# KERN SCD-4.0-DLS05

Data: 19.04.2025

ITALIANO



Registrazione o trasmissione flessibile dei valori di misurazione, in particolare anche con Microsoft® Excel o Access

## CONTACT


KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : info@kern-sohn.com  
Web : www.kern-sohn.com




Scansiona qui per maggiori informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI

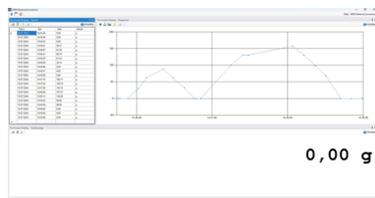

Substanz	Menge	Datum / Uhrzeit	Differenz	Abweichung	Gesamt
Vaseline	2000 g	2023-05-07 12:28	0,47 g	0,23%	2000,47 g
(große Mengen) Alkohol	4000 g	2023-05-07 12:28	11,21 g	2,80%	611,68 g
Wasser	2000 g	2023-05-07 12:28	2,39 g	0,12%	1,64,57 g
(kleine Mengen) Dropropin	1,000 g	2023-05-07 12:28	-0,0077 g	-0,01%	1,623,0977 g
Theobromin	1,000 g	2023-05-07 12:28	-0,0026 g	-0,18%	1,620,0977 g
Ricin	0,0001 g	2023-05-07 12:28	0,0001 g	100,00%	1,620,0988 g

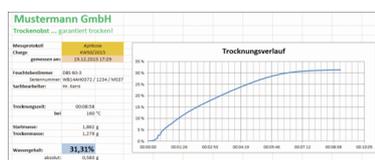

ITALIANO

## DESCRIZIONE

- Per sistemi operativi Windows 10, 11
- È richiesto .NET Framework 4.8.1
- Per l'installazione sono necessari i diritti di amministrazione completi
- Supporta bilance e strumenti di misurazione con USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, rete LAN oppure WiFi (TCP/UDP/IP)
- Massima flessibilità di formattazione e strutturazione della stampa (sequenza e posizionamento a piacere, formattazione e arrotondamento), in particolare su richiesta anche registrazione di data e ora per ogni valore trasmesso
- Numero discrezionale di apparecchi/interfacce collegabili, anche registrazione contemporanea e sincronizzata di più bilance
- Richiesta mediante tasti o temporizzata di valori di misurazione o attivazione di funzioni dell'apparecchio anche per registrazioni continue
- I protocolli di interfaccia delle bilance KERN (configurazione standard) sono già predefiniti. Possibilità di supportare altre bilance grazie alla configurazione flessibile

- Il rispettivo cavo d'interfaccia è compreso ordinando contemporaneamente una bilancia KERN
- Varie e numerose possibilità di trasmissione e registrazione:
  - MicrosoftR Excel/Access/Word in primo piano o di sfondo
  - Altra applicazione Windows (tramite simulazione tasti), p. es. software di spedizioni o sistema ERP (SAP, Sage,...)
  - Archiviazione file (p. es. come testo o come file CSV)
  - Stampa su stampante per testi o per etichette
- Stampe di schermate come visualizzazione grande, diagramma di andamento ( curva di essiccazione nei misuratori d'umidità, istogramma, ...
- : Vantaggi
  - Gli errori di battitura, possibili nella digitazione manuale, sono esclusi
  - Registrazione automatica, per es. per prove di durata
  - Software di laboratorio conforme alle indicazioni GLP
  - Utilizzabile ad ampio spetto per settore e applicazione
- Materiale in dotazione: Link per scaricare 5 licenze

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SCD-4.0-DLS05
Modello-Serie	SCD
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	Connessione bilancia
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1488700
Modello precedente	SCD-4.0S05
Numero di tariffa doganale	85234910

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

## SERVIZI

Modello	Descrizione
970-105	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-105