


Software EasyTouch

# SET-40 Protect

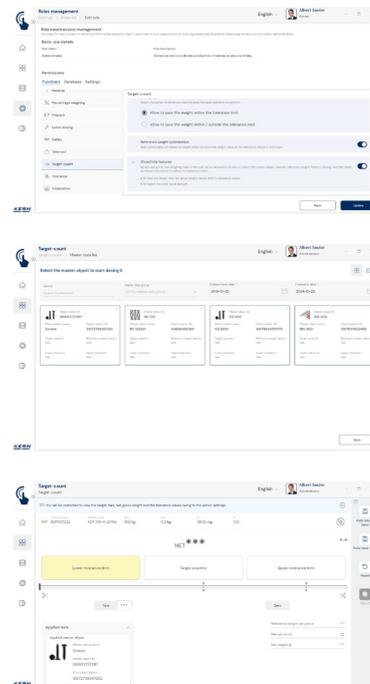

## EasyTouch Protect – Proteggere i dati aziendali sensibili in modo sicuro ed efficiente

### Caratteristiche

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- SET-40 Protect è compatibile con i seguenti set: SET-01 Base, SET-16 Batch and statistics, SET-21 Formulation, SET-32 Count, SET-33 Target count, SET-35 Assembly count e SET-31 Tolerance
- Protezione delle ricette sensibili: Questa funzione può essere utilizzata per nascondere tutti i dati critici della ricetta e impedirne l'accesso non autorizzato
- Protezione dei dati di pesatura sensibili: Durante il dosaggio o la pesatura, i valori di pesatura target sono rappresentati in modo neutro da “\*\*\*”, in modo che sia visibile solo il risultato grafico basato sul valore target e sui valori di tolleranza inferiore e superiore
- Protezione dei nomi degli oggetti sensibili: Il nome di una sostanza o di un oggetto viene mascherato per alcuni gruppi di utenti, in modo che sia visibile al massimo il numero identificativo della sostanza senza i valori del peso target
- Opzioni flessibili di protezione dei dati: A seconda del ruolo dell'utente, è possibile scegliere se visualizzare solo i valori di peso target o anche i nomi dei singoli componenti della ricetta, per esempio

- Immettere la quantità totale di destinazione: Nella schermata iniziale, gli utenti inseriscono la quantità totale del target senza vedere le singole quantità del target o i pesi dei componenti
- Risultati mascherati: Nella schermata dei risultati, anche i pesi target e i pesi effettivamente pesati vengono visualizzati solo in modo mascherato come “\*\*\*”
- Visualizzazione di quantità limitate nella memoria: In Dynamic Memory non vengono visualizzate le quantità per alcuni gruppi di utenti
- Visualizzazione trasparente per gli amministratori: La visualizzazione in chiaro delle quantità o dei pesi previsti e dei pesi effettivamente rilevati è sempre disponibile per i gruppi di utenti autorizzati, come gli amministratori

### Opzioni

- Funzione di salvataggio dati centralizzata Save Server (SET-10) per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di misurazione in un server directory locale centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte le app EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile

- Save-Cloud: Svolge la stessa funzione di memoria dati centrale per tutti i sistemi ET collegati, come Save-Data Server. La differenza consiste nel fatto che nel Save-Data Cloud i dati sono salvati in un server KERN, raggiungibile da Internet e non su un server che si trova nella rete locale. Il vantaggio del Save-Data Cloud sta nel fatto che la configurazione si svolge in modo automatico e non è necessario l'intervento di un amministratore di rete, KERN SET-101
- EasyTouch Quick Key (SET-311): questa funzione consente di riservare determinati oggetti con dati base per determinati ruoli utente. Gli utenti in questione possono visualizzare gli oggetti selezionati come tasti di accesso rapido sullo schermo

### Dati tecnici

- La licenza include: Una licenza può funzionare in modo contemporaneo e indipendente su un massimo di quattro terminali (PC, laptop, tablet)
- User: Con una licenza è possibile creare un numero illimitato di utenti
- Balance: Con una licenza è possibile creare e gestire un numero illimitato di bilance
- Comunicazione balance-terminale: La(e) bilancia(e) possono comunicare con PC, laptop o tablet mediante collegamento seriale, USB, Bluetooth, Ethernet o WiFi

DI SERIE



SU RICHIESTA

