

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
SET-18**

Data: 19.04.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-18

**Container
Master**

EasyTouch Container Master – Gestione centralizzata dei container

CONTACT





KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI

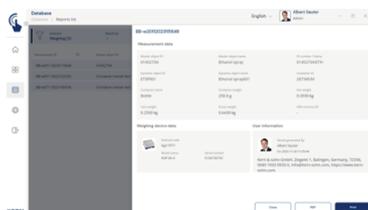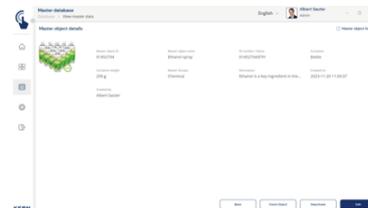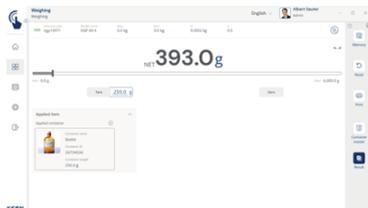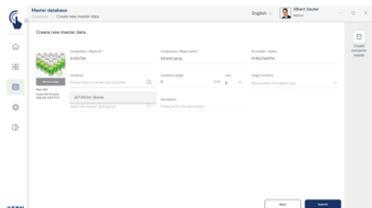

ITALIANO

DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Gestione dei container: I diversi articoli vengono immagazzinati e pesati in container dello stesso tipo. La tara di questi container può essere gestita centralmente con SET-18 Container Master. Se il peso di un container cambia, la nuova tara viene semplicemente aggiornata in Container Master e applicata automaticamente a tutti gli articoli e le funzioni associate nell'applicazione
- Assegnazione fissa: È possibile assegnare in modo permanente un container a ciascun oggetto dei dati anagrafici per garantire la coerenza
- Esposizione del container: Quando si utilizza un oggetto dei dati anagrafici, gli utenti vedono in EasyTouch il container assegnato in modo permanente o un container selezionato manualmente. Questo riduce il rischio di confusione e migliora la precisione del processo di lavoro
- Selezione del container: Gli utenti possono selezionare un container anche durante il processo di pesatura senza alcuna definizione preliminare, ad esempio scansionando l'ID del container con un codice a barre. In questo modo si evitano valori errati della tara

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-18
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761478312
Numero di tariffa doganale	85234910

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



Option

